

# Video Play Link Tool (Light)



画像再生オプションツール (Video Play Link Tool) は、PSG フォーマットで収録保存された波形データと同期して収録された動画データ (専用 Video Recorder Tool を使用) を読み出して、波形と同期して動画再生するためのツールプログラムです。

オプション機能により、**Light** 版と **Standard** 版が用意されています。

**Light** 版は、動画の波形同期再生、画像クリップ登録機能が可能です。


## 特徴

- 波形ビューワープログラム (Bio Signal Viewer, AP-Viewer) のアドインプログラムです。
- 専用の画像収録プログラムで収録した画像と波形を同期再生します。
- 独立ウィンドウ上で再生・コントロールできます。再生ウィンドウは任意の位置・大きさを指定できます。
- 再生スピードは1倍とスロー再生、高速再生などが可能です。コマ送りも可能です。音声は、1倍再生時のみ可能です。高速再生は2倍、5倍、20倍が可能です。
- 波形と同期した再生が可能です。波形上でカーソル指定した時点の画像を即座に再生できます。
- 再生画像の一時的なズーム (拡大) が可能です。
- 再生画像を再生画像の一時的なズーム (拡大) が可能です。
- 画像のクリップリスト登録機能で最大200画像を登録できます。登録画像は一覧で参照したりクリップボードコピーが可能です。登録したクリップ画像位置はイベントグラフ上に表示できます。
- 操作ヘルプが充実しています。


## 録再生画面例 (Light 版)



## 画像再生制御画面例

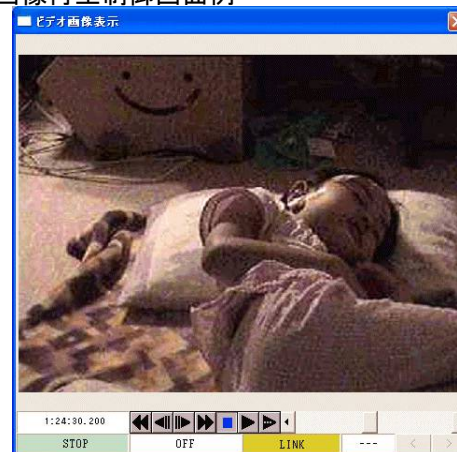


## 一時ズーム機能

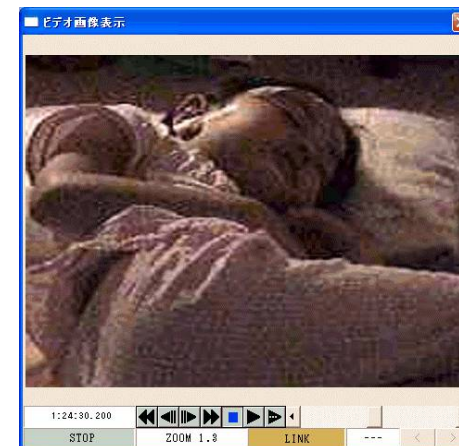

## クリップリスト画像一覧表示



## 画像イベントグラフ例

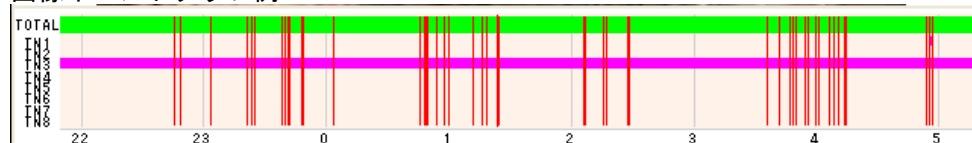

## 仕様 (Light 版)

- 動画表示
  - 独立ウィンドウ表示
  - 1倍再生 (音声再生)、スロー再生、コマ送り (前後)
  - 高速送り (2倍、5倍、20倍)、高速戻り (2倍、5倍、20倍)
- 波形同期再生
  - 可能
- 画像ズーム
  - 一時的な画像ズーム機能
- 画像のクリップコピー
  - ビットマップ形式で可能
- 音声同期再生
  - 1倍再生で可能、長時間連続再生では同期不可
- 画像クリップリスト機能
  - 登録 (最大 200)、リスト一覧表表示、登録画像の一覧表示
  - 画像一覧のクリップボードコピー (Metaファイル形式)
- 登録イベントグラフ
  - 登録したクリップリストのイベントグラフ表示

このソフトウェアは、基礎医学研究用途にご使用ください。

## 動作環境

- ペンティアム4 1GHz 以上の DOS/V 機
- メモリ 2GB 以上 (推奨 4GB 以上) 空き HD 容量 10GB 以上
- XGA (1280×1024) 以上の解像度 (推奨 1600×1280)
- 動作 OS Windows7, Windows8, Windows10, WindowsXp (すべて日本語環境)