

## DC 呼吸センサ

DC 呼吸センサセット

AP-C034-013(S) : AP-C034-020(S)

---

空気圧式の DC 呼吸センサ。

DC～10Hz の特性で、無呼吸、深さ、速さなどの観察が可能。

今までなかった呼吸波形モニタを可能にします。


AP-C034-\*\*\*(S)は、空気圧式呼吸センサセットです。

胸腹部に巻いた呼吸センサは、呼吸運動により生じた圧力変化を、アダプタ内のひずみゲージ式圧力センサで電圧信号に変換し、出力します。


直流からの測定が可能で、ゼロ調整機能によりピックアップを装着した状態を初期状態(ゼロ)として計測できます。センサ部分(ジャバラ)は、長さ約 22cm 22φと小型になっています。



# 無呼吸状態の比較

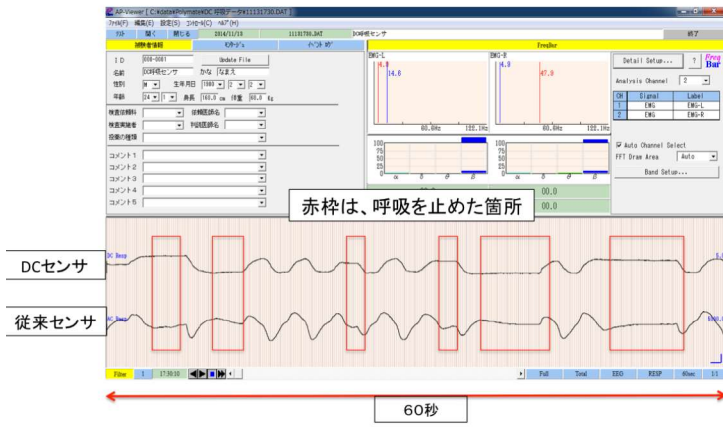

ゆっくりした呼吸

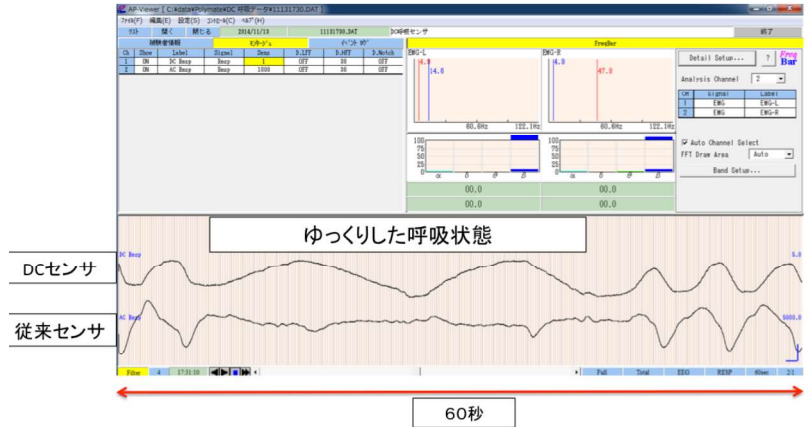

## 仕様

品名	DC呼吸センサ
形式	AP-C034-013 AP-C034-020
センサタイプ	空気圧式
出力コネクタ	エアコネクタ
寸法・質量	AP-C034-013:全長1.3m 約160g AP-C034-020:全長2.0m 約200g

## セット構成

システム販売名称	DC呼吸センサ セット	
形式	AP-C034-013(S)	AP-C034-020(S)
構成	AP-C034-013 AP-U033 出力コード	AP-C034-020 AP-U033 出力コード

品名	呼吸アダプタ
形式	AP-U033
チャンネル数	1
雑音	100mVp-p以下
周波数特性	0~10Hz
ゼロ調整機能	有り
出力電圧	最大±2.5V
電源	内部:006P型アルカリ乾電池(9V)
電池連続使用時間	48時間以上
寸法・質量	約D92×W67×H28mm 約80g

届出番号 13B2X00025000071  
 クラス I、一般医療機器  
 一般の名称 胸腹呼吸センサ(70073000)

※ ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

※ 本カタログの記載内容は2018年9月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

製造販売元



本 社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階  
 TEL.03(3818)8631 FAX.03(3818)8632  
 西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F  
 TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>