

Pull up BOX AP-U165 (A)


基礎医学研究用機器




ポリメイトシリーズ以外のプルアップ機能のない装置に対して押しボタンスイッチなどを接続する時に使用できます。

本ユニットはオープンコレクタ形式の出力に対して+5Vのプルアップ電圧を提供します。

○使用例1：押しボタンスイッチ AP-C354-015 ノーマルクローズタイプ（オプション）

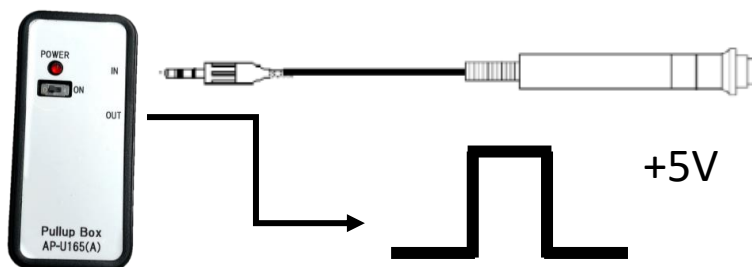

○使用例2：無線トリガユニット 受信機：AP-U052（オプション）

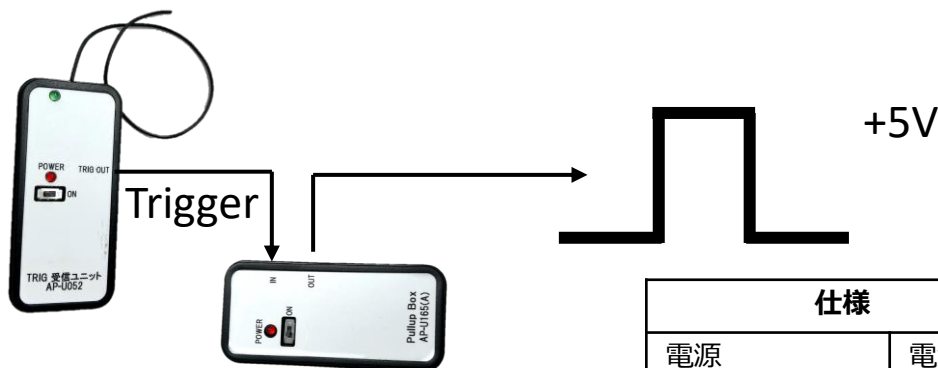

仕様

電源	電池(CR2032 1個)
サイズ	H12 x W35 x D75mm
付属品	CR2032 2個
連続使用時間	約100時間（連続通電時）

本製品は研究用機器です。臨床用途では使用できません。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

本カタログの掲載内容は2024年8月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14 本郷ダイヤビル6階
TEL:03-3818-8631 FAX:03-3818-8632
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL:06-6350-0775

<https://www.miyuki-net.co.jp/>

MQS-07-183 (改02)