


Polymate text 変換ツール MG70-012

基礎医学研究用機器

ポリメイトデータのテキスト変換が
一括で可能になりました！

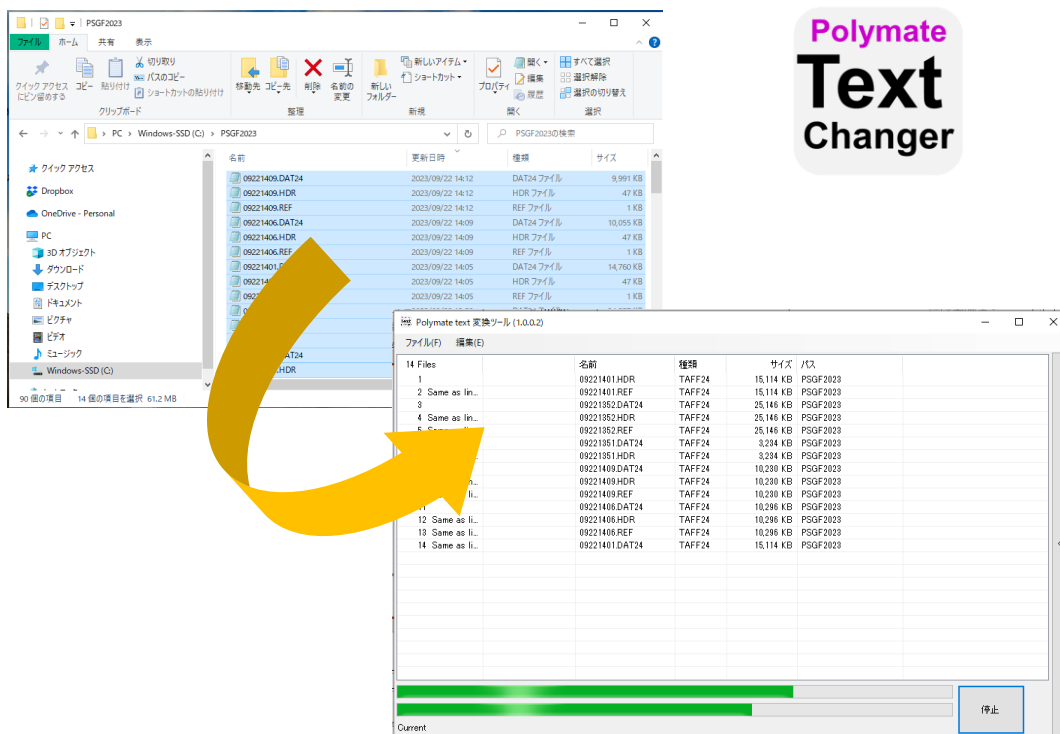


Polymate
Text
Changer

製品特長

- ・ポリメイトのデータを一括でテキスト変換が可能
PSG共通フォーマット (V1.1)、TAFF24フォーマット
※電極単位モードのPSG共通フォーマットは対象外
- ・エクスプローラーからファイルをドラッグするだけの簡単操作
- ・ヘッダー情報やチャンネル名情報の変換の有無を任意で選択可能

チャンネル名情報変換の有無の選択

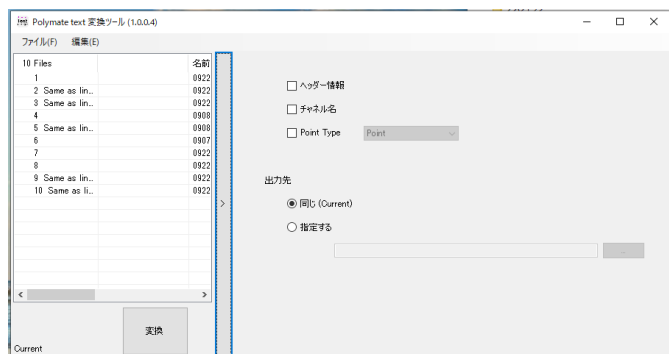

保存先は、元ファイルと同じ場所もしくは任意の指定先フォルダに保存が可能

チェック無し

| | A | B | C |
|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | 3.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 2 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 3 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 4 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |

ヘッダー情報あり

| | A | B | C |
|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sampling | 500 | |
| 2 | | uV | uV |
| 3 | 3.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 4 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |

チャンネル名あり

| | A | B | C |
|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | EVE | Fp1 | Fp2 |
| 2 | 3.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 3 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |
| 4 | 0.00E+00 | -3.60E+04 | -2.24E+04 |

仕様

Polymate Text 変換ツール 型式：MG70-012

- ・ Windows10, 11対応

対応フォーマット

- ・ TAFF24 形式
- ・ PSGF 形式 (以下の形式のみ対応)
 - ・ Ver 1.1, 信号チャンネル形式

構成

- ・ USBメモリ：ソフトウェアインストーラー、取扱説明書PDF
- ・ ライセンス認証番号用紙

メジャー 及び マイナーバージョンのアップデートは製品購入後 1年間は無償で行うことができます。以降は有償での対応となります。

リビジョンのアップデートは無償で行うことができます。

本製品は研究用機器です。臨床用途では使用できません。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

本カタログの掲載内容は2024年2月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

開発元

 株式会社 ミユキ技研

本 社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14 本郷ダイヤビル6階
TEL:03-3818-8631 FAX:03-3818-8632
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館 3F
TEL:06-6350-0775

<https://www.miyuki-net.co.jp/>

MQS-07-242(00)